

myobrace®

STRAIGHT TEETH THE NATURAL WAY

FOR BRACES

PERMANENT DENTITION

Denture permanente
avec brackets

Utiliser
pendant une
heure le jour
et pendant le
sommeil

Améliore l'efficacité des brackets orthodontiques.



www.myobrace.com


PATIENTS INTERNATIONAUX : DÉTAILS DISPONIBLES À MYORESEARCH.COM

Qu'est-ce qui cause les problèmes orthodontiques?


La majorité des enfants du 21ème siècle auront un alignement incorrect des maxillaires et des dents encombrées. Le traitement typique utilise des brackets, qui sont efficaces pour l'alignement dentaire, mais des habitudes comme les postures linguales, la respiration buccale et la déglutition incorrecte (mauvaises habitudes myofonctionnelles) peuvent causer des problèmes qui allongeront la durée du traitement et provoqueront des récidives. Ces habitudes myofonctionnelles peuvent être traitées avec succès en conjonction avec des brackets et quand les brackets ont été déposés et les contentions mises en place. Cela assure que les mâchoires sont complètement développées une fois les brackets déposés et que les contentions maintiennent les dents alignées.

Dents normales vs dents encombrées

L'encombrement dentaire peut être causé par une position et une fonction incorrectes de la langue. Corriger la position et la fonction de la langue facilite l'expansion des maxillaires et l'alignement des dents par les brackets, sans extractions et avec plus de stabilité.

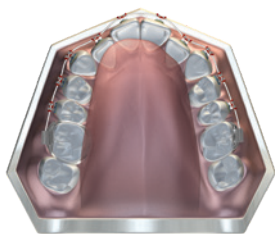

ARCADE SUPÉRIEURE
ENCOMBRÉE

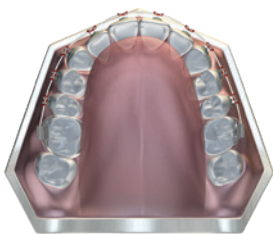

ARCADE SUPÉRIEURE
NORMALE

Une position correcte de la langue aide les brackets à fonctionner plus efficacement.

Comment ça marche


MRC est le pionnier de l'utilisation des appareils pour corriger les habitudes myofonctionnelles chez les enfants en croissance et améliorer les résultats de la correction orthodontique. Cela veut dire corriger la respiration buccale, la position de la langue et le schéma de déglutition, ce qui peut conduire à un meilleur développement facial chez l'enfant.

Myobrace® for Braces s'utilise pour corriger ces habitudes myofonctionnelles en conjonction avec des brackets, pour faciliter l'expansion d'arcade et l'alignement des dents.

Objectifs de traitement:

- Lèvres jointes en permanence sauf pour parler ou manger.
- Respirer par le nez pour faciliter le développement des maxillaires et arriver à une occlusion correcte.
- Pas d'activité des lèvres lors de la déglutition, ce qui permet aux dents antérieures de se développer correctement.
- Meilleur alignement dentaire.
- Meilleur développement facial.

Pour que le *Myobrace®* fonctionne, vous devez corriger vos mauvaises habitudes myofonctionnelles.

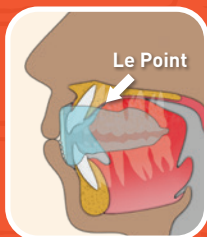

Position de repos
correcte


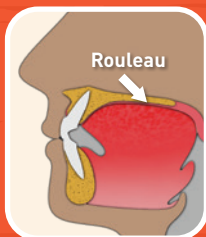


Schéma de déglutition
correcte

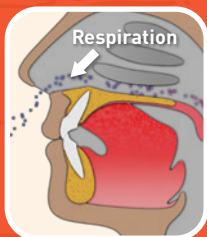

Eveil à la
respiration

Myobrace® for Braces - B3

Le *Myobrace® for Braces B3* est conçu pour être utilisé en conjonction avec les gouttières transparents supérieur et inférieur ainsi que les appareils orthodontiques afin d'améliorer leur efficacité. Le *Myobrace® for Braces B3* se place sur des gouttières transparents afin d'aider à corriger de mauvaises habitudes myofonctionnelles ainsi que l'alignement de la mâchoire inférieure. La combinaison de la correction des habitudes, de l'alignement de la mâchoire et de l'expansion de l'arche apportée par la série des *Myobrace® for Braces* diminue la durée des traitements orthodontiques et améliore la stabilité.

Caractéristiques de conception du *Myobrace® for Braces*

l'étape 3 - correction des habitudes lors de la phase de contention



Gorges élargies - pour recevoir les gouttières transparentes.

Languette linguale, cage et rampe à langue - entraînent la langue à se placer correctement dans la mâchoire supérieure.

Lip bumper étendu et écrans vestibulaires hauts - découragent l'hyperactivité des lèvres et encouragent la respiration nasale.



Mode d'emploi:

Utilisez votre appareil *Myobrace*® une à deux heures le jour et toute la nuit en dormant.

Vos dents peuvent devenir légèrement sensibles au début du traitement. C'est normal, mais si la sensibilité devient excessive, réduisez le temps de port et prévenez votre praticien.




Étape 1 – Tenez le *Myobrace*® languette linguale vers le haut.



Étape 2 – Placez le *Myobrace*® dans votre bouche.



Étape 3 – Gardez la langue sur la languette linguale.

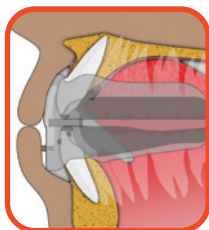

Étape 4 – Fermez la bouche sur le *Myobrace*® et sentez-le essayer d'aligner vos dents antérieures et vos mâchoires.



Étape 5 – Gardez les lèvres jointes et respirez par le nez.

Ne mâchouillez pas votre *Myobrace*®!

L'appareil peut au début tomber pendant le sommeil. Si cela se produit, augmentez le port diurne.

Mode d'emploi

Myobrace® for Braces est un système d'appareils en trois étapes, spécialement conçu pour être compatible avec les brackets, tout en corrigeant les mauvaises habitudes buccales, en améliorant les problèmes de développement des mâchoires supérieure et inférieure et en aidant les appareils fixes à aligner les dents permanentes.

Ces appareils corrigent les mauvaises habitudes myofonctionnelles qui peuvent causer un mauvais alignement dentaire, et produisent des forces légères pour aider à l'expansion de la mâchoire supérieure et aider les brackets à aligner les dents en position correcte.

Le Traitement

La durée du traitement peut varier en fonction de l'adaptabilité biologique de chaque patient. L'appareil **Myobrace®** doit être utilisé tous les jours pour assurer le succès. Une surveillance régulière par votre orthodontiste ou dentiste est essentielle pour le succès du traitement et pour éviter les effets indésirables.

Nettoyage de votre Myobrace® : Nettoyez votre **Myobrace®** sous l'eau chaude chaque fois que vous le retirez de votre bouche. Utilisez les tablettes **Myoclean™** pour le nettoyer à fond deux fois par semaine. Demandez à votre praticien ou à son assistante des détails sur **Myoclean™**, le nettoyant recommandé pour tous les appareils **Myobrace®**.

Durée de vie : 6 mois pour un port quotidien. Remplacez au bout de 12 mois quel que soit le temps de port.

ATTENTION : À utiliser seulement sous la surveillance d'un orthodontiste ou d'un praticien agréé.



Myobrace® par Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999

Représentant aux USA :

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1 866 550 4696



Représentant en Europe :

Myofunctional Research Europe B.V.
Gompensstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION



UTILISATION
MULTIPLE POUR
UN SEUL ET
MÊME PATIENT



CONSERVER À
L'ABRI DE LA
LUMIÈRE DIRECTE
DU SOLEIL



NETTOYER
AVANT
UTILISATION