

myobrace®

FOR BRACES

ANWENDUNG
ÜBER NACHT
UND EIN BIS
ZWEI STUNDEN
TAGSÜBER

für bleibende
Zähne mit
fester Zahnsperre

Verbessert die Wirksamkeit des
Bent-Wire-Systems (BWS)



www.myobrace.com

Weltweit patentiert. Weitere Informationen unter myoresearch.com.


Wo liegen die Ursachen kieferorthopädischer Probleme?

Bei der Mehrzahl der Kinder sind heutzutage die Kiefer nicht korrekt zueinander ausgerichtet und es entstehen Zahnengstände. Die Behandlung erfolgt im Normalfall mit einer festsitzenden Zahnsperre, die zwar die Zähne effektiv begründet, aber nicht dazu beiträgt, Gewohnheiten wie Zungenpressen, Mundatmung und falsches Schlucken (sog. myofunktionelle Habits) abzustellen. Diese Habits können aber Probleme verursachen, die zu einer Verlängerung der Behandlungszeit und zu Rückfällen nach Abschluss der Behandlung führen können.


Die myofunktionellen Habits lassen sich sowohl parallel zur Behandlung mit einer festsitzenden Zahnsperre als auch nach Entfernung der Brackets und Einbringen eines Retainers erfolgreich behandeln. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kieferbögen vollständiger entwickelt sind, wenn die Brackets entfernt werden; außerdem unterstützt die Maßnahme die Retainer bei ihrer Aufgabe, die Zähne in der korrekten Position zu halten.

Engstand und normale Zahnstellung

Zahnengstände können durch eine falsche Position und Funktion der Zunge verursacht werden. Werden die Zungenposition und -funktion korrigiert, unterstützt dies die Wirkung der Zahnsperre, die dann den Kiefer leichter verbreitern und die Zähne einfacher gerade richten kann, ohne dass hierfür Zähne gezogen werden müssten. Die Behandlungsergebnisse bleiben außerdem besser bestehen.

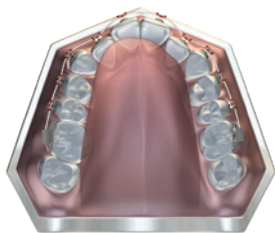

Engstand im Oberkiefer

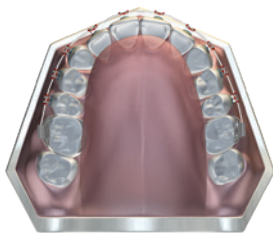

Normale Zahnstellung im Oberkiefer

Eine korrekte Zungenposition unterstützt und verstärkt die Wirkung der Zahnsperre.

Wie Myobrace® funktioniert

MRC hat als Pionier die Anwendung von Apparaturen zur Korrektur myofunktioneller Habits bei Kindern in der Wachstumsphase vorangetrieben und hat damit die Erfolgsaussichten von kieferorthopädischen Behandlungen verbessert. Hierzu gehört die Korrektur der Mundatmung, der Zungenposition und von Schluckmustern, was bei Kindern in der Wachstumsphase eine bessere Gesichtsentwicklung bewirken kann.

Myobrace® for Braces wird in Kombination mit einer festsitzenden Zahnsperre (Brackets) eingesetzt, um diese myofunktionellen Habits abzustellen, und hilft dabei, Platz im Kiefer zu schaffen und die Zähne leichter in die korrekte Stellung zu bringen.


Behandlungsziele:

- Die Lippen sollen stets geschlossen sein, außer beim Sprechen oder Essen.
- Die Atmung soll durch die Nase erfolgen, um die Entwicklung des Ober- und Unterkiefers zu unterstützen und einen korrekten Biss zu erzielen.
- Beim Schlucken soll keine Aktivität der Lippen stattfinden, wodurch sich die Frontzähne korrekt entwickeln können.
- Verbesserung der Zahnstellung
- Verbesserte Entwicklung des Gesichts


Damit das **Myobrace®** richtig wirken kann, musst du deine bisherigen Angewohnheiten (myofunktionellen Habits) korrigieren.



korrekte
Ruheposition

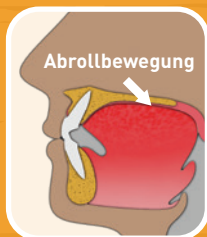

korrektes
Schluckmuster

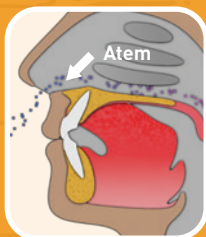

bewusste
Atmung

Myobrace® for Braces - B1 BWS

Das Myobrace® for Braces B1 BWS wird zusammen mit dem Farrell Bent Wire System™ (BWS™) verwendet und hilft bei der Verbreiterung des Zahnbogens und der Korrektur von sogenannten Habits.

Das Myobrace® B1 BWS wird mit dem BWS™ zusammen angewendet, um eine falsche Zungenposition und -funktion zu korrigieren und zusätzlichen Platz für die Zähne zu schaffen. Diese Kombination aus Kieferexpansion, Korrektur von Habits und Ausrichtung des Kiefers, die das Myobrace® for Braces B1 BWS bietet, ermöglicht eine stabilere Entwicklung von Ober- und Unterkiefer.

Funktionselemente des Myobrace® for Braces

Phase 1: Korrektur von Habits



Bracketkanal: Bietet den BWS™-Brackets und dem Bogen im Ober- bzw. Unterkiefer Raum, schützt Wangen und Zahnfleisch

Zungentrainer, Zungenschild und Zungenheber: trainieren die Zunge, in der korrekten Position im Oberkiefer zu bleiben

Verlängerter Lip-Bumper und hohe Seitenteile: vermindern die Überaktivität der Lippen und fördern die Nasenatmung



Gebruiksaanweisung

Trage dein *Myobrace*® täglich ein bis zwei Stunden tagsüber und nachts beim Schlafen.

Am Anfang der Behandlung können deine Zähne möglicherweise etwas empfindlich sein. Das ist ganz normal, aber falls die Schmerzen sehr stark werden, verkürze die Tragedauer und wende dich an deinen Zahnarzt bzw. Kieferorthopäden.




1. Schritt: Halte das *Myobrace*® mit dem Zungentrainer nach oben.



2. Schritt: Setze das *Myobrace*® in deinen Mund ein.



3. Schritt: Positioniere deine Zunge auf dem Zungentrainer und lasse sie dort ruhen.

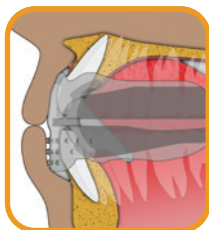

4. Schritt: Schließe den Mund um das *Myobrace*® herum und du wirst spüren, wie es zu wirken beginnt und die Vorderzähne und den Kiefer in die richtige Position bringt.



5. Schritt: Halte die Lippen geschlossen und atme durch die Nase.

**Nicht auf dem
Myobrace®
herumkauen!**

Das *Myobrace*® kann am Behandlungsanfang beim Schlafen manchmal herausfallen. Wenn das passiert, solltest du es tagsüber länger tragen.

Indikationen

Myobrace® for Braces ist ein dreistufiges System kieferorthopädischer Apparaturen, das speziell für die Kombination mit festsitzenden Zahnspangen entwickelt wurde. Es korrigiert schädliche Angewohnheiten im Mundbereich, verbessert die Entwicklung von Ober- und Unterkiefer und unterstützt die Wirkung der festsitzenden Zahnspange bei der Korrektur der Zahnstellung von bleibenden Zähnen.

Diese Apparaturen korrigieren schlechte Angewohnheiten, die sogenannten myofunktionellen Habits, welche die Ursache schiefer Zähne sein können, und sie üben leichte Kräfte aus, damit Platz im Oberkiefer geschaffen wird. Außerdem unterstützen sie die Wirkung der Brackets bei der korrekten Ausrichtung der Zähne.

Wichtige Punkte zur Therapie

Die Behandlungsdauer ist individuell unterschiedlich und hängt davon ab, wie gut sich die Gewebe des Patienten an die neue Situation anpassen können. Für eine erfolgreiche Behandlung muss die **Myobrace®** - Apparatur täglich angewendet werden.

Eine regelmäßige Kontrolle durch den Zahnarzt bzw. Kieferorthopäden ist für den Behandlungserfolg und zur Vermeidung unerwünschter Behandlungsergebnisse entscheidend.

Reinigung des Myobrace®: Reinige dein **Myobrace®** jedes Mal, wenn du es aus dem Mund genommen hast, unter fließendem, warmem Wasser. Verwende zur ordnungsgemäßen Reinigung zweimal wöchentlich die **Myoclean™** - Reinigungstabletten. Frage bei deinem Zahnarzt oder Kieferorthopäden nach **Myoclean™**, dem empfohlenen Reinigungsmittel für alle **Myobrace®** - Apparaturen.

Haltbarkeit: 6 Monate bei täglicher Anwendung; unabhängig von der Tragedauer nach 12 Monaten ersetzen.

WARNHINWEIS: Nur unter zahnärztlicher oder kieferorthopädischer Aufsicht anwenden!



Myobrace® von Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999

Ansprechpartner in den USA:

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1 866 550 4696



Ansprechpartner in Europa:

Myofunctional Research Co. Europe B.V.
Gompensstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**
INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION



EINZELNER PATIENT
- MEHRFACH
ANWENDBAR



VOR DIREKTER
SONNENEINSTRALUNG
SCHÜTZEN



VOR
GEBRAUCH
REINIGEN